

Características:


- Tela sensível ao toque de 7 polegadas, oferecendo conforto e facilidade de uso
- Teste de vazamento (automático), assegurando proteção do endoscópio durante todo o ciclo
- Controle da solução de desinfecção, sendo possível predefinir o tempo de uso ou quantidade de ciclos, com alarme visual e sonoro.
- Sensor de abertura da tampa
- Compatível com todas as soluções desinfetantes, inclusive ácido peracético
- Compatível com todos os modelos de endoscópios, inclusive ecoendoscópios
- Cuba de 14,5 litros proporcionando melhor enxágue e projetada para evitar a contaminação cruzada durante a operação
- Tampa transparente para uma visualização eficiente do ciclo
- Ciclo de autodesinfecção programável

Especificações técnicas:

- Kits de tubos para todas as marcas (Olympus, Fujinon, Pentax, Storz)
- Pressão da conexão da água: 2,6 a 6 bar
- Acompanham o equipamento: Cabo de alimentação elétrica, tanque de 15l para detergente enzimático, elementos filtrantes de partículas (1, 0,5 e 0,2 micra), – um conjunto de tubos – para uma marca de endoscópio (definir no momento do pedido).
- Frequência: 50 a 60Hz
- Bivolt (115 V / 230 V)
- Fusível: T 3,15, IEC 127 (2 unidades)
- Potência máxima na entrada: 650 VA
- Consumo máximo de corrente: 2,75 A / 2,5 A
- Sistema de proteção Elétrica Classe I
- Capacidade da bomba de limpeza: 500 a 600 ml/min

Dimensões (A x L x P / mm)
Sem gabinete
480 x 750 x 520
Incluindo gabinete
1240 x 750 x 530
Peso (Kg)
Sem gabinete
45
Incluindo gabinete
65

Versão compacta sem gabinete para bancada

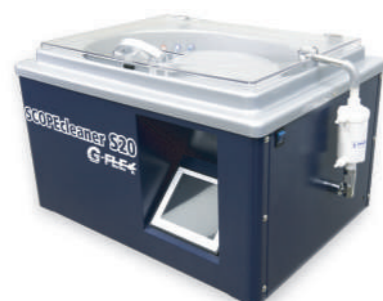

Importador Exclusivo:
GFE DO BRASIL LTDA
Rua Buarque de Macedo, 1310
Vila Nova, Campinas / SP
Cep. 13073-010
Fone : +55 19 3213 1355
Fax : +55 19 3234 6120
<http://www.endo-flex.com.br>
sales@endo-flex.com.br

CE₀₄₈₃ Vers. 2 - 06/2014



SCOPEcleaner S20

Reprocessador Automático de Endoscópios

SCOPEcleaner S20

Reprocessador Automático de Endoscópios

O **SCOPEcleaner S20** é um reprocessador automático para desinfecção de alto nível de endoscópios flexíveis. Seu processo eficaz garante ao paciente e aos usuários maior proteção e segurança.



Irrigação individual de até 5 canais, incluindo jet channel

Monitoramento contínuo de fluxo para todos os canais

Atende a legislação brasileira atual. Produzido na Alemanha há mais de 10 anos, possui Certificação Européia (CE), onde o produto se enquadra às diretrizes européias 93/42/EEC para equipamentos médicos.

Sistema de entrada de água exclusivo, que não permite a contaminação da rede

Rastreabilidade do ciclo de reprocessamento: armazenamento digital, dispositivo USB ou impressão de dados (impressora opcional)

Alertas visuais e sonoros

Desinfecção com imersão total para todos os tipos de endoscópios flexíveis e ecoendoscópios

Sensor de abertura da tampa

Controle do uso da solução de desinfecção: Alertas por uso e data de vencimento

Reservatórios de detergente e desinfetante externo à máquina, permitindo a retirada para higienização.

Sistema de filtragem de água em dois estágios com controle contínuo por três manômetros

Acessórios:



Filtros de sucção



Kits de tubos para todas as marcas de endoscópios



Conexões para testes de vazamento para todas as marcas de endoscópios